

本格ズーム機能搭載

EM-30 シリーズ

双眼実体顕微鏡

ズーム変倍式

上位モデルと同等の総合倍率 7 ～ 45 倍、
ズーム比 6.5 倍を実現した、高性能モデルです。
長作動距離 100mm、3W の
高輝度白色パワー LED 照明等、
双眼実体顕微鏡としての重要な要素に
特にこだわりました。
幅広い用途でご利用頂けます。

キャリーグリップ

安全確実に持ち運び可能です

ズーム変倍機能

標準で総合倍率 7X ～
45X、高ズーム比 6.5
倍を誇ります。



三眼鏡筒モデル有

光路の切替が不要な設計とな
っておりますので、接眼レン
ズでの観察と、モニター観察
や写真撮影が同時に出来ます
(EM-33)

メタルラック& ピニオンスタンド

頑強で、なおかつ安定感に
優れております



EM-32



長作動距離 100mm

観察しながらの作業性に大変優
れております


落射



透過



落射+透過

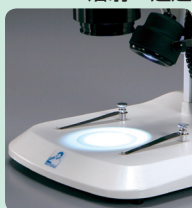

3W白色パワー LED光源

上位モデルと同等の高出力を
実現しました。落射照明に加
え、透過照明も付いておりま
すので、様々なサンプルの観
察にご活用頂けます

薄型ステージ

サンプルに触れながらの観察も
し易くなっております

型 式	EM-32	EM-33
税 別 価 格	¥92,000	¥99,000
税込価格(8%)	¥99,360	¥106,920
総 合 倍 率	7X ～ 45X	
接 眼 レ ン ズ	WF10X/20mm 2 個	
対 物 レ ン ズ	0.7X ～ 4.5X (ズーム比 1 : 6.5) ズーム変倍式	
鏡 筒	45° 傾斜 360° 回転式 双眼	両眼視度調節 眼幅調整範囲 55 ～ 75mm 三眼
ス タ ン ド	ラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付	
焦 準 装 置	鏡筒上下動式	
作 動 距 離	100mm	
照 明 装 置	白色パワー LED 3W (落射 / 透過 / 落射+透過 切替可能 連続調光式)	
付 属 品	目当てゴム 2 個 AC アダプタ ビニールカバー	

(巻末にオプションについての記載がございます)