


偏光観察の入門機

MT-90 シリーズ

簡易偏光顕微鏡

コストパフォーマンスに優れた偏光顕微鏡です。
可能な限りシンプルな構成にしましたので、
簡単操作で偏光観察をご使用頂けます。
教育・実習向けに最適な一台です。

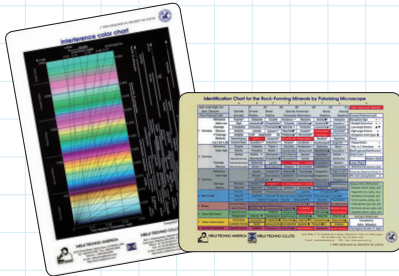

「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表／干渉色図表のプラスチック下敷き」を、1台につき1枚お付け致します。

キャリーグリップ

安全確実に持ち運び可能です

標本安全装置

対物レンズとプレパラートの接触を防ぎます

回転ステージ

芯出し調整が可能となっております

粗微動同軸ダイヤル

2つのダイヤルの握り替えが快適に行えます

虹彩絞り

無段階にコントラストの調節が可能です



MT-93

4穴レボルバ


必要に応じて60Xまたは100Xの対物レンズも追加可能です

セミبران対物レンズ

視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます

スプリング付対物レンズ

対物レンズとプレパラートを接触させてしまった際にも、破損を最小限に留めることができます(40X以上の対物レンズに装備)

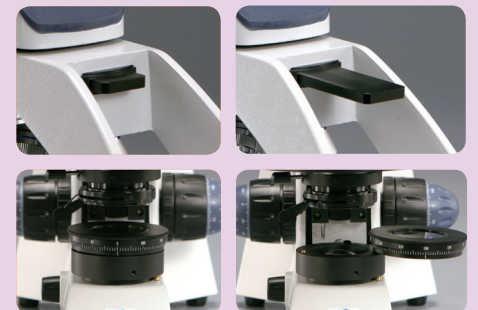

スライド式アナライザ、はねのけ式ポラライザ

偏光観察の入門機として、シンプル、簡単操作を追求しました

ハロゲンランプ

自然光に近い色味で、偏光観察用に人気の光源です(ご希望によりLED照明への変更にも対応)

型式	MT-90	MT-94	MT-93
税別価格	¥128,000	¥138,000	¥148,000
税込価格(8%)	¥138,240	¥149,040	¥159,840
総合倍率	40～400X	40～400X	40～1000X
接眼レンズ	WF10X/18mm 1個	WF10X/18mm 2個	WF10X/18mm 2個
対物レンズ	DIN セミبران アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25		
鏡筒	単眼	30°傾斜 360°回転	双眼
焦準装置	粗微動同軸焦準ハンドル 標本安全装置付		
レボルバ	4穴 ボールベアリング内蔵 内向き		
ステージ	直径135mm 回転メタルステージ 芯出し調整機能付		
コンデンサ	アップコンデンサ N.A. 1.25 虹彩絞り付 高さ調節可		
偏光観察用装備	アナライザ(スライド式) ポラライザ(はねのけ式 360°回転可)		
照明装置	ハロゲンランプ 12V20W [連続調光式] ※LED照明にも変更可能です。ご相談下さい		
付属品	下敷き(偏光顕微鏡による鉱物鑑定表/干渉色図表) ACアダプタ ビニールカバー イメージンオイル(MT-93のみ)		

(巻末にオプションについての記載がございます)