

ペットの糞便等の検査、飼い主様への説明には
メイジテクノの

生物顕微鏡カメラセット

がおすすめです

三眼生物顕微鏡 + Wi-Fi カメラセット MT-51/35/500-MC

三眼生物顕微鏡MT-51 と 0.35 倍レンズ入り C マウントアダプタ、人気の Wi-Fi C マウントカメラをセットにしました。iPad や Android タブレットに無線接続し、サンプルのライブビュー観察や静止画・動画の撮影が可能です。

- 総合倍率 40 倍～1000 倍
- プラン対物レンズ使用
- 本格 LED ケーラー照明

セット特典
● Wi-Fi カメラ用 AC アダプタ
● MicroSD カード 8GB
プレゼント!

MT-51/35/500-MC セット価格 **¥254,000**
(税込 ¥279,400)

MT-51 (三眼モデル) (Cマウントアダプタ、カメラなし) ¥155,000 (税込 ¥170,500)
MT-50 (双眼モデル) ¥145,000 (税込 ¥159,500)



タブレットの画面をお見せしながら説明できます。

※画面はハメコミ合成です。

※セットにタブレット PC は付属しておりません。

日本製

高級三眼生物顕微鏡 + 高機能カメラセット MT5300L/05/1500M



※画面はハメコミ合成です。

自社工場で作られた高品質な三眼生物顕微鏡 MT5300L と 0.5 倍レンズ入り C マウントアダプタ、高性能 C マウントカメラ HD1500M の 3 点をセットにしました。

HDMI ケーブルで液晶モニターに直結する事で、地上デジタル放送と同等の 30fps という高速フレームレートを実現しました。付属のマウスをカメラに接続し操作する事で、サンプルの静止画・動画撮影等が可能です。USB 2.0 ケーブルで PC に接続してご使用いただく事も可能です。

- 総合倍率 40 倍～1000 倍
- U プラン対物レンズ使用
- 本格 LED ケーラー照明

15,000円
お得!


MT5300L/05/1500M
3点合計価格 ~~¥548,300~~ → セット特価 **¥533,300**
(税込 ¥586,630)

MT5300L (三眼モデル) (Cマウントアダプタ、カメラなし) ¥358,600 (税込 ¥394,460)
MT5200L (双眼モデル) ¥336,600 (税込 ¥370,260)

※セットに液晶モニターは付属しておりません。

税込価格は消費税率 10% で表示しています。

メイジテクノ 生物顕微鏡 カメラセット

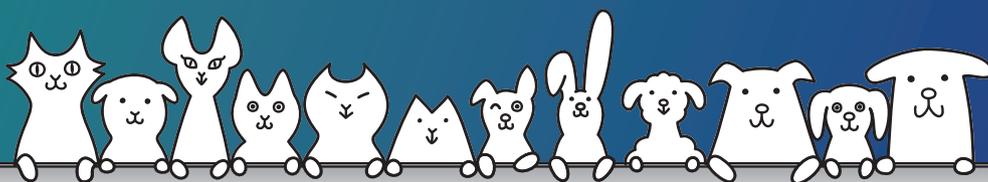

■ 三眼生物顕微鏡+Wi-Fi カメラセット MT-51/35/500-MC 製品仕様

三眼生物顕微鏡+Cマウントアダプター部 (MT-51/35)	
光学系	無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
総合倍率	40X~1000X
鏡筒	双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm~75mm 接眼筒内径30mm 三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) Cマウントアダプター(0.35倍レンズ入)付属
接眼レンズ	10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付)(2個) 接眼レンズロック機構付
レボルバ	5穴レボルバ 内向き
対物レンズ	フラン・アクロマート 4X(N.A.0.10) 10X(N.A.0.25) S40X(N.A.0.65) S100X oil(N.A.1.25)
ステージ	ラック&ピニオン式メカニカルステージ 右下同軸式ハンドル
コンデンサ	アッペコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り 高さ調節可
焦点装置	粗動/微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式 標本安全装置(粗動ストッパー)付
照明装置	LEDケラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載
付属品	ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書
Wi-Fi Cマウントカメラ部 (SS500-MC)	
撮像素子	1/2.3インチ(有効領域約1/3インチ)CMOSセンサー
最大有効画素数	2912 × 1640(約500万画素)
静止画形式	jpg
動画記録解像度	1080p/60fps 1080p/30fps 720p/60fps 720p/30fps 720p/120fps WVGA/240fps
動画形式	MP4(H.264+AAC)
Wi-Fi	内蔵
ライブビュー解像度	WVGA(録画時はWQVGA)
充電電池	リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)
記憶媒体	8GBマイクロSDカード付属(セット購入特典)
外部インターフェイス	・USB端子(MicroB)(充電用)(USBケーブルを介してPCに静止画・動画データの移動が可能)(ACアダプタ接続可) ・HDMI端子(MicroD)(HDMI端子を備えたモニターやテレビにライブビュー表示可)(HDMIケーブルは別売です)
外径サイズ	54.4 × 61.2 × 36.74mm ※突起部含まず
付属品	USBケーブル(1m) 保護キャップ 保証書 ACアダプタ(セット購入特典)

■ 高級三眼生物顕微鏡 + 高機能カメラセット MT5300L/05/1500M 製品仕様

三眼生物顕微鏡+Cマウントアダプター部 (MT5300L MA151/MT05)	
光学系	無限遠補正光学系(F=200mm)
総合倍率	40X~1000X
接眼レンズ	SWH10X(視野数 22mm)(ハイアイポイント仕様) 2個
対物レンズ	DIN Uフラン・アクロマートレンズ 4X(N.A.0.1) 10X(N.A.0.25) S40X(N.A.0.65) S100X oil(N.A.1.25)
鏡筒	双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 接眼筒内径30.0mm 写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) Cマウント(レンズ無し) Cマウントアダプター(0.5倍レンズ入)付属 光路切替レバーにより、(双眼部:写真鏡筒部)の光量の割合を(10:0)⇔(2:8)に変更可能
スタンド	アルミダイキャストボディ
焦点装置	粗微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式 標本安全装置付
レボルバ	5穴 ボールベアリング内蔵 内向き
ステージ	ラック&ピニオン式メカニカルステージ 左下同軸式ハンドル セラミックコーティング
コンデンサ	アッペコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可
照明装置	LED 3W(連続調光式)
付属品	ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書
Cマウントカメラ部 (HD1500M)	
撮像素子	1/2.8型 CMOSセンサー
フレームレート	HDMI接続時:30fps(1920 × 1080) USB2.0接続時:30fps(1920 × 1080)
レンズマウント	Cマウント
静止画撮影	3264 × 1836(約600万画素)
動画撮影	1080P(1920 × 1080 プログレッシブ方式) 30fps (SDメモリーカードまたはPCへ保存)
端子・スロット類	HDMI(HDMIモニター出力用) USB2.0(マウスまたはPC接続に使用) SDメモリーカードスロット ACアダプタ用端子
マウスで操作可能な項目	露出 ホワイトバランス ガンマ ゲイン シャープネス 彩度 コントラスト 比較表示機能(2画像表示) シャッター機能
PC接続	USB2.0
PC用ソフトウェア(モニター部)	「Capture 2.2」 対応OS: Windows 7以降 (付属していません。別途ご用意をお願い致します。)
付属品	HDMIケーブル USBケーブル ACアダプタ SDメモリーカード マウス(USB接続) USBメモリー(PC用ソフトウェア収録)

取扱店



顕微鏡/関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp

