



フルハイビジョン・Cマウントカメラ



HD1500M

価格: ¥176,000 (税込¥193,600)

ソニー製 CMOS センサーを採用。
高画質・高精細な映像で観察が行えます。
地デジと同じ 30fps の高速フレームレート。
動きの速いサンプルや素早い顕微鏡操作
でもリアルタイムに映像が表示されます。
カメラ内部にコントロール機能を内蔵。
PC を使用せずにカメラ操作が可能です。

モニター直結, PC 不要

HDMI ケーブルでカメラとモニターを接続すると、
すぐにライブ観察が行えます。

静止画 & 動画撮影

フルハイビジョンの動画撮影と 600 万画素の
静止画撮影が可能です。

簡易・計測機能

パソコンを使用せずに、モニター画面上で
サンプルの寸法計測が行えます。

マウス操作機能

USB マウスをカメラに接続すると、モニター上で
簡単にカメラ操作が行えます。

SD カード保存

カメラに SD カード(32G まで)を挿入することで、
静止画と動画の保存が行えます。


高速ライブ表示

1 秒間 30 コマの滑らかなライブ映像。
遅延を気にせずに、素早い操作が可能です。




■ 商品仕様

センサーサイズ	1/2.8 型 カラーCMOS (SONY 裏面照射型)
ライブ映像	フル・ハイビジョン (1920×1080)
フレームレート	30fps (1920×1080)
記録メディア	SD / SDHC カード (※最大 32G まで)
静止画撮影	約 600 万画素 (3264×1840)
動画撮影	1080p / 25fps (AVI 形式)
露出	オート設定, マニュアル設定 / 0.001 秒~10 秒
ホワイトバランス	オート設定 (ロック機能あり)
画像調整	ゲイン, ガンマ, 彩度, コントラスト, HDR 補正
映像出力	HDMI (モニター接続), USB2.0 (パソコン接続)
マウス操作機能	静止画撮影, 動画撮影 カメラ設定 (露出, ホワイトバランス, 画像調整) 左右・上下反転, 拡大・縮小, クロスライン表示 トリミング, 2 画面比較, サムネイル表示
簡易・計測機能	直線, 長方形, 多角形, 角度, 円, フリーハンドなど 校正値の保存 (10 個まで)
サイズ, 重量	(H)90.7×(W)78×(D)70.8mm, 448g
付属品	USB マウス, AC アダプター, SDHC カード 16GB HDMI ケーブル, USB ケーブル USB メモリー (PC 用画像計測ソフト) 対応 OS: Windows 7, 8, 10

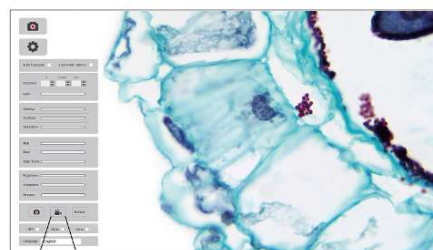


video

[マウス操作で、簡単撮影]

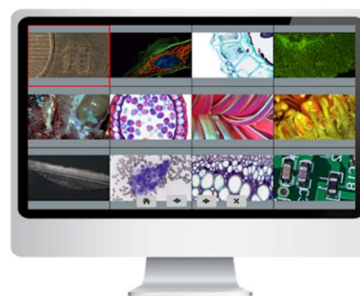

[サムネイル表示]

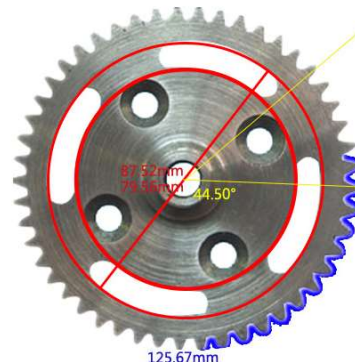

[ライブ計測機能を搭載]

11.6 型 フルハイビジョン・モニター付モデル



HD1500MM

価格: ¥231,000 (税込 ¥254,100)

HD1500M に小型液晶モニターをセットしました。
限られたスペースでのモニター観察に最適です。

[モニターの仕様]

- 液晶パネル: IPS-Pro, 11.6 インチ
- 解像度: 1920 × 1080 (アスペクト比 16:9)
- 画素ピッチ: 0.1338mm
- 入力端子: HDMI
- 付属品: 2 分岐電源ケーブル, L 型 HDMI ケーブル
モニター取付金具



顕微鏡 / 関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

https://www.meijitechno.co.jp