

フルハイビジョン・Cマウントカメラ



HD1000-LITE

価格: ¥98,000 (税抜)

安定したモニター観察と画像撮影*ができるフルハイビジョンのCマウントカメラ。

HDMIケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにPCレスで観察が行えます。

特長は、簡単なカメラ操作。

USBマウスを使用して、画面上のメニューをPC感覚で操作することができます。

★FPGA dual-core processor 搭載。

モニター直結, PC 不要

HDMIケーブルでカメラとモニターを接続すると、すぐにライブ観察が行えます。

静止画 & 動画撮影

Full HD(1080p/30fps)の動画撮影と500万画素の静止画撮影が可能です。

PC 接続機能

USB2.0ケーブル&計測ソフト(英語)を使用して、PCでもカメラ操作や画像撮影が行えます。

マウス操作機能

USBマウスをカメラに接続すると、モニター上で簡単にカメラ操作が行えます。

SD カード保存

カメラにSD/SDHCカードを挿入することで、静止画・動画の保存が行えます。


Cマウント接続

Cマウントアダプターがある顕微鏡であれば、さまざまなメーカーの顕微鏡に接続が可能です。



■ 商品仕様

イメージセンサー	タイプ: 1/2.5 型 カラーCMOS モデル: onsemi MT9P001112STC
ライブ映像	フル・ハイビジョン (1920×1080)
フレームレート	15fps (1920×1080)
記録メディア	SD / SDHC カード (※8G まで)
静止画撮影	約 500 万画素 (2592×1944)
動画撮影	1080p / 15fps (AVI 形式)
露出	オート設定, マニュアル設定 / 0.001 秒~2 秒
ホワイトバランス	オート設定 (ロック機能あり)
画像調整	ゲイン, ガンマ, 彩度, コントラスト
映像出力	HDMI (モニター接続) USB2.0 (パソコン接続)
マウス操作機能	静止画撮影, 動画撮影 カメラ設定 (露出, ホワイトバランス, 画像調整) 左右・上下反転, 拡大, 縮小 トリミング, 2 画面比較, アルバム表示
付属品	USB マウス, AC アダプター HDMI ケーブル, USB ケーブル USB メモリー (PC 用画像計測ソフト) 対応 OS: Windows 7 以降

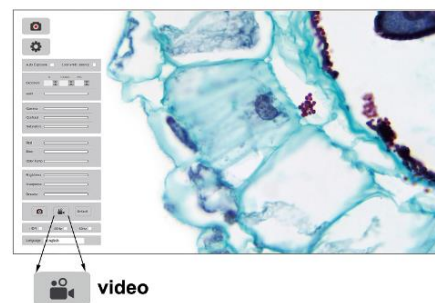

[マウス操作で、簡単撮影]



[アルバム表示]



[2 画面比較]

11.6 型 フルハイビジョン・モニター



MONITOR-HD

価格: ¥50,000 (税抜)

HD1000-LITE に装着可能な小型液晶モニターです。
限られたスペースでのモニター観察に最適です。

[商品仕様]

- 液晶パネル: IPS-Pro, 11.6 インチ
- 解像度: 1920×1080 (アスペクト比 16:9)
- 画素ピッチ: 0.1338mm
- 入力端子: HDMI
- HD1000-LITE への取付金具が付属



顕微鏡 / 関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp

