

ペットの糞便等の検査、飼い主様への説明には

メイジテクノの

生物顕微鏡カメラセット

がおすすめです

三眼生物顕微鏡+WiFi カメラのセット MT-51/50/1200

三眼生物顕微鏡MT-51 と 0.5 倍レンズ入り C マウントアダプタ、人気の Wi-Fi C マウントカメラの組み合わせです。


iPad/iPhone や Android タブレット / スマホに 5G WiFi で接続し、サンプルのライブビュー観察や静止画・動画の撮影が可能です。

- 総合倍率 40 倍～1000 倍
- プラン対物レンズ使用
- 本格 LED ケーラー照明

4,550円
お得

MT-51/50/1200 セット価格 **¥315,000**
(税込 ¥346,500)

MT-51 (三眼モデル) (Cマウントアダプタ、カメラなし) ¥178,250 (税込 ¥196,075)
MT-50 (双眼モデル) ¥166,750 (税込 ¥183,425)
DK1200 (WiFi カメラ) ¥129,800 (税込 ¥142,780)

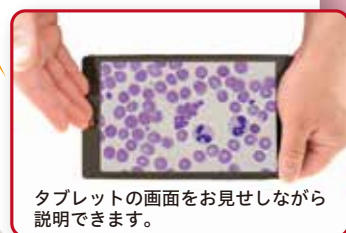

タブレットの画面をお見せしながら説明できます。

※画面はハメコミ合成です。

※WiFi カメラには別途、iPad / iPhone 又は Android タブレット / スマホが必要です。
※WiFi カメラに接続できる端末には「システム要件」があります。

日本製

高級三眼生物顕微鏡+高機能カメラ+モニターセット MT5300L/05/1500MM



自社工場で作られた高品質な三眼生物顕微鏡 MT5300L と 0.5 倍レンズ入り C マウントアダプタ、高性能 C マウントカメラ 1500M と 11.6 インチモニターの4点をセットにしました。

HDMI ケーブルでモニターに直結する事で、地デジと同等の 30fps という高速フレームレートを実現しました。付属のマウスをカメラに接続し操作する事で、サンプルの静止画・動画撮影等が可能です。USB 2.0 ケーブルで PC に接続してご使用いただく事も可能です。

- 総合倍率 40 倍～1000 倍
- U プラン対物レンズ使用
- 本格 LED ケーラー照明


16,545円
お得

MT5300L/05/1500MM
4点合計価格 **¥656,545** ⇒ セット特価 **¥640,000**
(税込 ¥704,000)

MT5300L (三眼モデル) (Cマウントアダプタ、カメラなし) ¥412,390 (税込 ¥453,629)
MT5200L (双眼モデル) ¥387,090 (税込 ¥425,799)

税込価格は消費税率 10% で表示しています。

メイジテクノ 生物顕微鏡 カメラセット

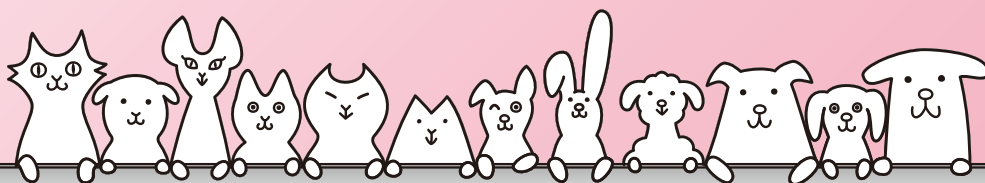

■ 三眼生物顕微鏡＋WiFiカメラ MT-51/50/1200 製品仕様

三眼生物顕微鏡＋Cマウントアダプタ (MT-51/50)	
光学系	無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
総合倍率	40X～1000X
接眼レンズ	10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付)(2個) 接眼レンズロック機構付
対物レンズ	プラン・アクロマート 4X(N.A.0.10) 10X(N.A.0.25) S40X(N.A.0.65) S100X oil(N.A.1.25)
鏡筒	双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm～75mm 接眼筒内径30mm 三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) Cマウントアダプター(0.5倍レンズ入)付属
レボルバ	5穴レボルバ 内向き
ステージ	ラック&ピニオン式メカニカルステージ 右下同軸式ハンドル
コンデンサ	アッペコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り付 高さ調節可
焦準装置	粗動/微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式 標本安全装置(粗動ストッパー)付
照明装置	LED 3W(白色LED) 視野絞り付
付属品	ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書

WiFi Cマウントカメラ (DK1200)	
イメージセンサー	1/2.3インチ SONY製CMOSセンサー
最大有効画素数	4000 × 3000(約1200万画素)
ピクセルサイズ	1.55μm × 1.55μm
動画形式	H.264/AVC
通信プロトコル	5G WiFi IEEE802.11ac
ライブビュー解像度	4000 × 3000@30fps、3840 × 2160@30fps
外部インターフェイス	・USB端子(電力供給用) ・HDMI端子 ・LAN端子
サイズ/重量	97 × 78 × 78mm(※アンテナ部191mm) 800g
付属品	HDMIケーブル(2m)
ハードウェアのシステム要件	iOS11.0～.CPU:DualCore1.8GHz～.メモリー≥2GB.ストレージ≥32GB. 5G WiFi IEEE802.11ac対応 Android5.0～.CPU:DualCore1.7GHz～.メモリー≥2GB.ストレージ≥32GB.5G WiFi IEEE802.11ac対応

■ 高級三眼生物顕微鏡＋高機能カメラモニターセット MT5300L/05/1500MM 製品仕様

三眼生物顕微鏡＋Cマウントアダプタ (MT5300L MA151/MT05)	
光学系	無限遠補正光学系(F=200mm)
総合倍率	40X～1000X
接眼レンズ	SWH10X(視野数 22mm)(ハイアイポイント仕様) 2個
対物レンズ	DIN Uプラン・アクロマートレンズ 4X(N.A.0.1) 10X(N.A.0.25) S40X(N.A.0.65) S100X oil(N.A.1.25)
鏡筒	双眼部:中折れ式 30°傾斜.眼幅調整 53mm～75mm 接眼筒内径30.0mm 写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠) Cマウント(レンズ無し) Cマウントアダプター(0.5倍レンズ入)付属 光路切替レバーにより、(双眼部:写真鏡筒部の光量の割合を(10:0)⇔(2:8))に変更可能
スタンド	アルミダイキャストボディ
焦準装置	粗微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式 標本安全装置付
レボルバ	5穴 ボールベアリング内蔵 内向き
ステージ	ラック&ピニオン式メカニカルステージ 左下同軸式ハンドル セラミックコーティング
コンデンサ	アッペコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可
照明装置	LED 3W(連続調光式) 視野絞り付
付属品	ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書

カメラモニターセット (HD1500MM)	
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY製CMOSセンサー
フレームレート	HDMI接続時:30fps(1920 × 1080) USB2.0接続時:30fps(1920 × 1080)
静止画撮影	約600万画素(3264 × 1840)
動画撮影	1080P/25fps (AVI形式)
外部インターフェイス	・HDMI(モニター接続) ・USB2.0(パソコン接続)
マウス操作機能	静止画・動画撮影.カメラ設定.反転.拡大.縮小.クロスライン表示.2画面比較
PC用ソフトウェア	「Capture2.4」 対応OS:Windows7,8,10,11 Mac
サイズ/重量	90.7 × 78 × 70.8mm 448g
付属品	HDMIケーブル USBケーブル ACアダプタ SDHCカード16GB USBマウス USBメモリー(PC用ソフトウェア収録)
画面サイズ	11.6インチ
解像度	1920 × 1080(フルハイビジョン) アスペクト比16:9

取扱店



顕微鏡/関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp

